




NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

Sièges de douche relevables - Série 2000

Configurations avec ou sans dossier / accoudoirs - Réf. SERIE 2000

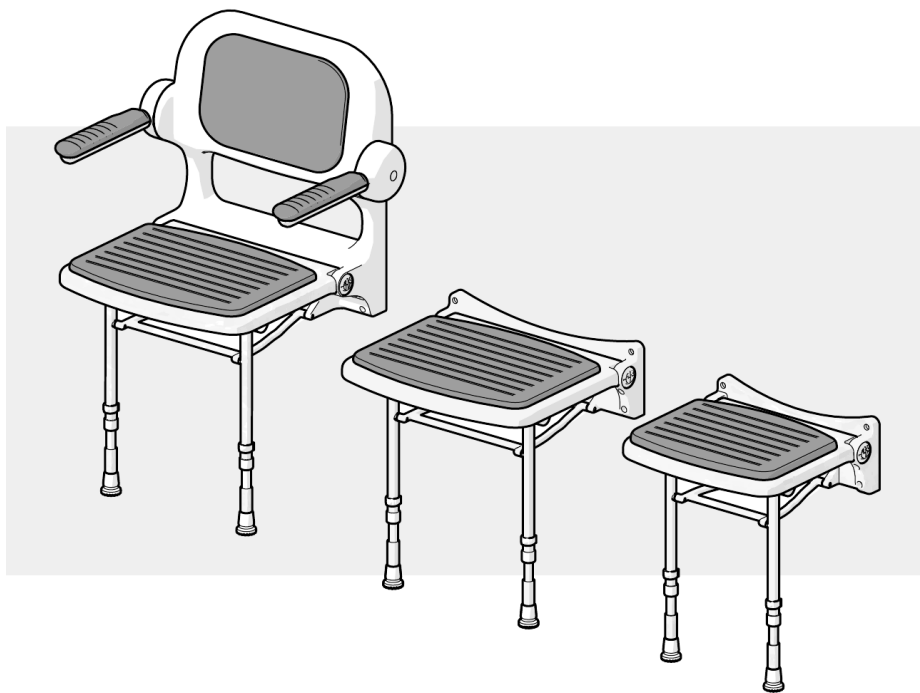

158 kg

charge maximale

3 configurations

gamme Série 2000

pieds réglables

mise à niveau

relevable

gain de place



À lire avant l'installation

Conserver cette notice et la remettre à l'utilisateur final. Avant montage, vérifier l'état du siège, la présence de toutes les pièces et la capacité du mur et du sol à reprendre les charges.




1. Configurations et dimensions


Plans cotés des trois configurations de la gamme
Série 2000

Version avec dossier et accoudoirs


Taille du siège

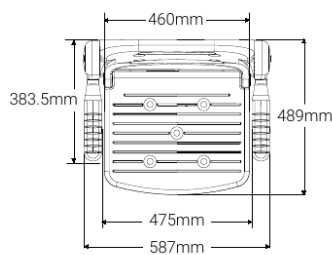


Fixation

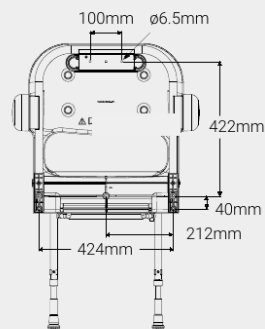





Hauteurs minimales et maximales.

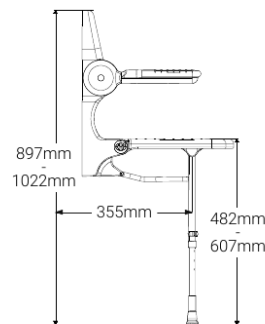





Taille pliée

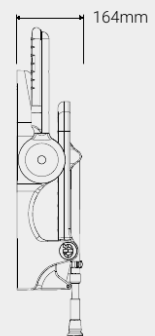

Version compacte - assise 380 x 365 mm

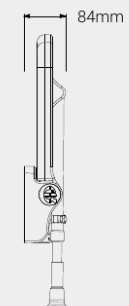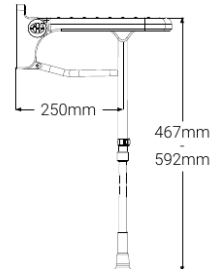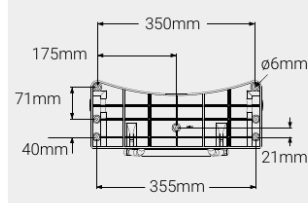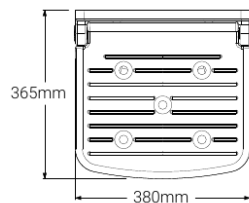

Version large - assise 460 x 415 mm

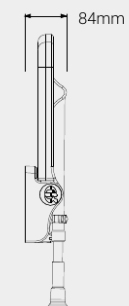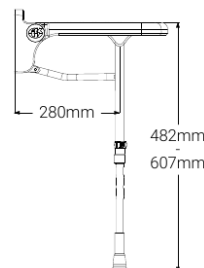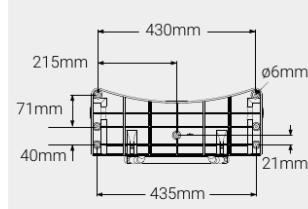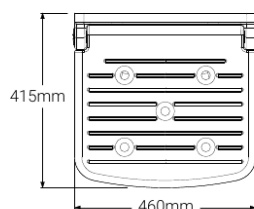

i

Repères principaux

Le plan source indique notamment une charge maximale de 158 kg. Selon la configuration, la hauteur d'assise réglable est de 467 à 592 mm ou de 482 à 607 mm. La version avec dossier atteint 897 à 1022 mm de hauteur totale et 164 mm d'épaisseur pliée ; les versions sans dossier sont données à 84 mm pliées.



2. Préparation et sécurité

Contrôle du support mural, du sol, des fixations et manipulation du siège


!

Support mural et sol

Fixer le siège sur une surface verticale finie capable de supporter les charges prévues. Le sol doit être adapté à l'appui des pieds. Les receveurs de douche en acrylique ne sont pas recommandés.


Règles de fixation

- Ne jamais dépasser la capacité de 158 kg.
- Utiliser tous les trous de fixation prévus.
- Ne pas utiliser de fixations à tête fraisée.
- Les fixations en acier inoxydable sont recommandées ; elles ne sont pas fournies.
- Vérifier l'absence de câbles et de canalisations avant de percer.
- Après installation, contrôler les capuchons de pivot et le verrouillage des clips en C des pieds.

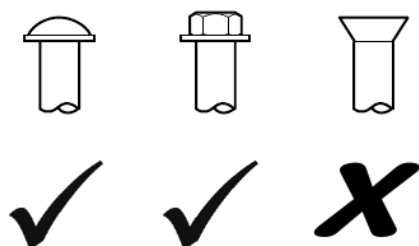

Têtes de vis : modèles admis et tête fraisée à proscrire

Fig. 1

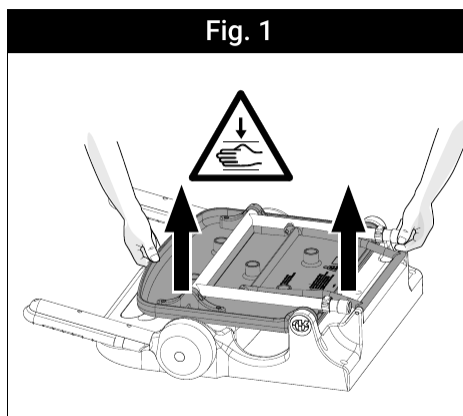

Soulevez la base du siège et les pieds ensemble.

Manipulation : soulever la base du siège et les pieds ensemble

!


Risque de pincement

Garder les doigts éloignés des zones de pivot lors du dépliage ou de la manipulation. Si le siège est retourné, soulever la base et les pieds ensemble et ne pas forcer les pieds pour les éloigner de la base.




3. Coussin et réglage des pieds

Montage des éléments optionnels et mise à niveau du siège

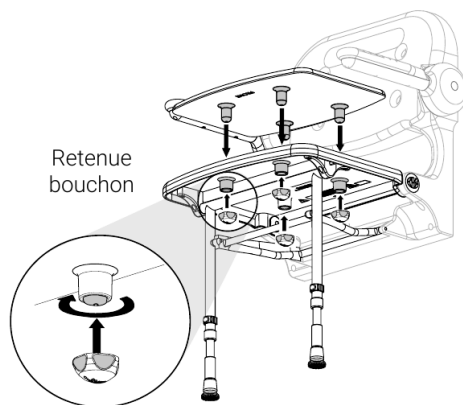

Assemblage du coussin et capuchons de retenue

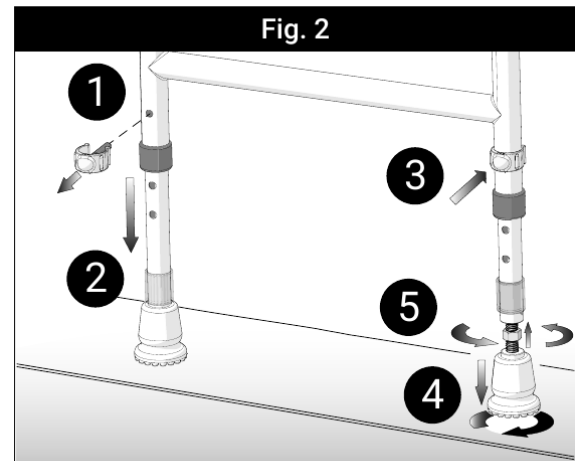

Réglage de hauteur et verrouillage par clips en C

Assemblage du coussin

1

Positionner

Poser le coussin sur l'assise en respectant le repère avant.

2

Installer les retenues

Chaque coussin utilise 4 capuchons de retenue sous l'assise.

3

Serrer à la main

Tourner les capuchons dans le sens horaire sous pression ferme. Ne pas serrer excessivement.

Réglage des pieds

1

Déverrouiller

Retirer les clips en C.

2

Régler la hauteur

Faire coulisser les pieds vers l'intérieur ou l'extérieur, puis réaligner les perçages.

3

Reverrouiller

Replacer complètement les clips en C.

4


Affiner la planéité

Un pied permet un réglage fin pour compenser une légère pente. Les deux pieds doivent être fermement posés au sol.




4. Installation - version avec dossier


Repérage, perçage, fixation murale et contrôle final

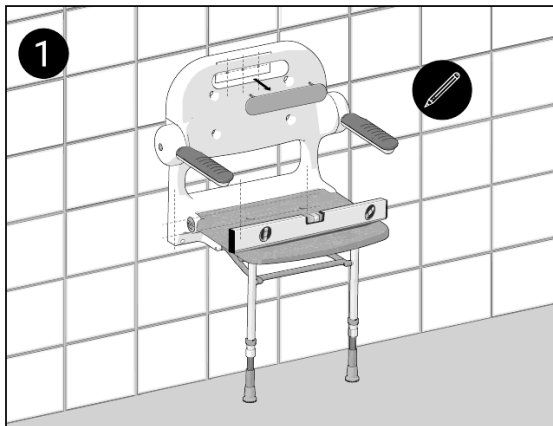


1 Marquez la position souhaitée des supports de montage sur le mur en vous assurant que le siège est de niveau. Ajustez les pieds pour effectuer un réglage plus fin.

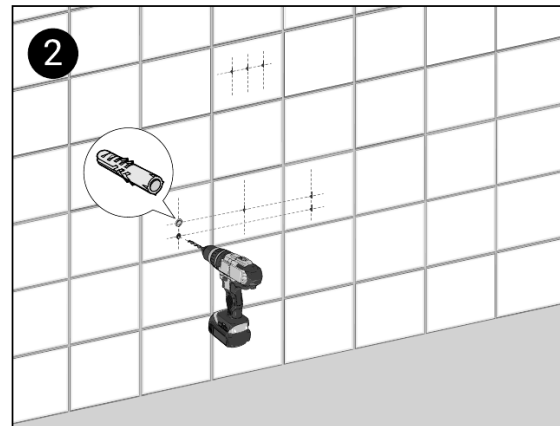

2 Vérifiez la présence de câbles et de canalisations avant de percer. Percez les trous à l'aide d'un foret approprié pour murs et carreaux et insérez les chevilles.

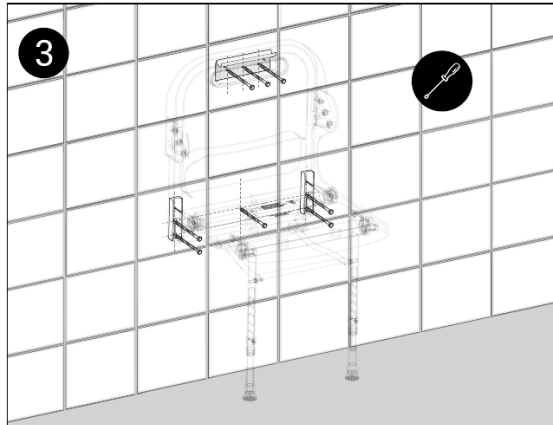

3 Utilisez des fixations murales appropriées pour fixer les supports de montage au mur. N'utilisez pas de vis à tête fraisée.

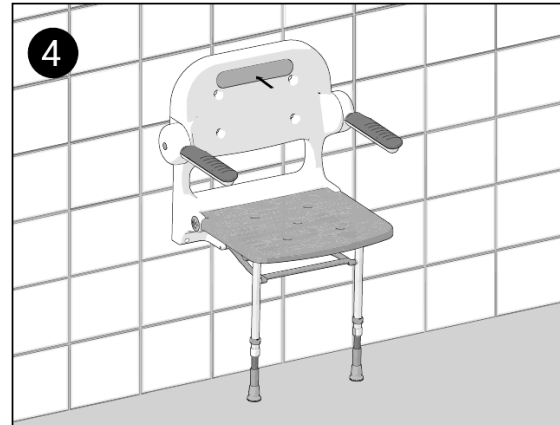

4 Assurez-vous que toutes les fixations sont solides. Remettez le cache-vis sur le dossier et assurez-vous que les pieds sont bien à plat contre la surface du sol.

Séquence de montage illustrée - siège avec dossier et accoudoirs




Contrôle après fixation

Toutes les fixations doivent être solides. Remettez les caches-vis et vérifiez que les deux pieds reposent fermement et à plat sur le sol. Finaliser ensuite le réglage fin du pied si nécessaire.




5. Installation - versions sans dossier


Repérage, perçage, fixation et remise en place des habillages

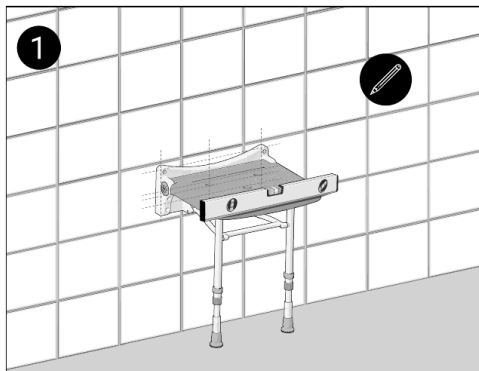


Marquez la position souhaitée des supports de montage sur le mur en vous assurant que le siège est de niveau. Ajustez les pieds pour effectuer un réglage plus fin.

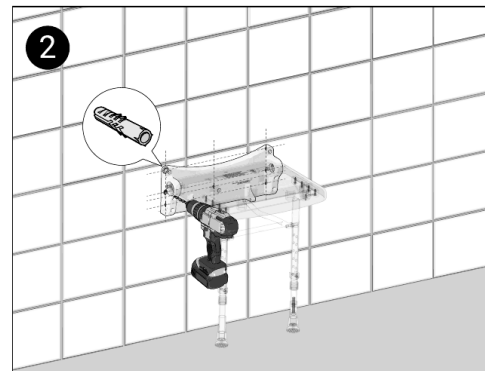


Vérifiez la présence de câbles et de canalisations avant de percer. Percez les trous à l'aide d'un foret approprié pour murs et carreaux et insérez les chevilles.

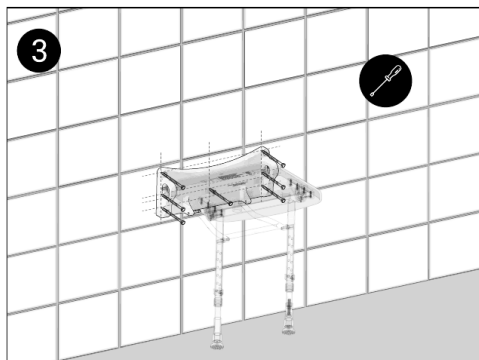

Utilisez des fixations murales appropriées pour fixer les supports de montage au mur. N'utilisez pas de vis à tête fraisée.

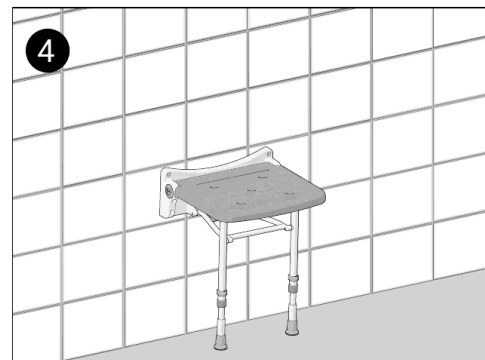

Assurez-vous que toutes les fixations sont solides. Fixez à nouveau les moulures du siège sur le cadre et assurez-vous que les pieds sont bien à plat contre la surface du sol.

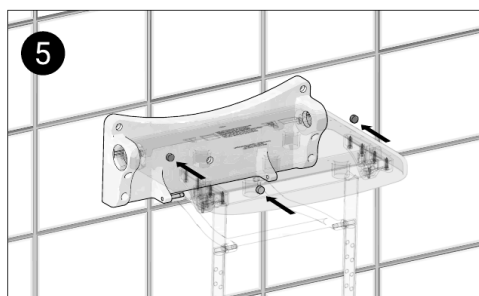

Le siège comprend des bouchons à vis qui doivent être insérés en dernier lieu dans les trous de vis du haut et du milieu, comme illustré sur l'image de gauche.

Séquence de montage illustrée - sièges relevables sans dossier

i

Finition

Après serrage de tous les points, remettre les moulures / caches. Lorsque le modèle comporte des bouchons à vis, les insérer en dernier dans les trous prévus. Vérifier ensuite l'appui complet des deux pieds au sol.



6. Utilisation, entretien et contrôle

Règles d'usage et maintien en bon état de fonctionnement

Utilisation

- Utiliser le siège uniquement comme assise de douche.
- Ne jamais monter debout sur le siège ni l'utiliser à mauvais escient.
- Ne jamais dépasser 158 kg.
- Les enfants et utilisateurs nécessitant une assistance peuvent avoir besoin d'une surveillance.
- Toute intervention d'entretien ou réparation doit être réalisée par une personne compétente.
- Il est recommandé d'intégrer le siège à un programme de contrôle périodique.

Nettoyage et désinfection

- Nettoyer périodiquement pour éliminer cheveux, résidus, saleté et dépôts d'eau, notamment au niveau des joints et pièces mobiles.
- Utiliser des produits de nettoyage domestiques courants compatibles avec les plastiques.
- Après nettoyage, rincer à l'eau puis essuyer soigneusement avant séchage.
- Ne pas employer de produits acides, alcalins, fortement concentrés ou abrasifs.
- En cas de désinfection, appliquer les procédures adaptées à l'équipement et vérifier la compatibilité du produit chimique.
- Si un produit plus puissant doit être utilisé, effectuer d'abord un essai sur une petite zone.

Contrôle périodique

Élément	Valeur
Fixations murales	Absence de jeu
Clips en C des pieds	En place et verrouillés
Embouts des pieds	En bon état
Pivots et mécanisme relevable	Mouvement libre / sans jeu anormal
Coussin et éléments rembourrés	Fixation et état corrects
Stabilité générale	Deux pieds fermement au sol



En cas d'anomalie

Cesser l'utilisation si le siège est instable, endommagé ou si une fixation, un pied ou un pivot présente un défaut susceptible d'affecter la sécurité.