




NOTICE DE MONTAGE

Siège de douche rembourré, rabattable et réglable

Pour salle de bain PMR - Réf. AR592 / schéma de montage H-2

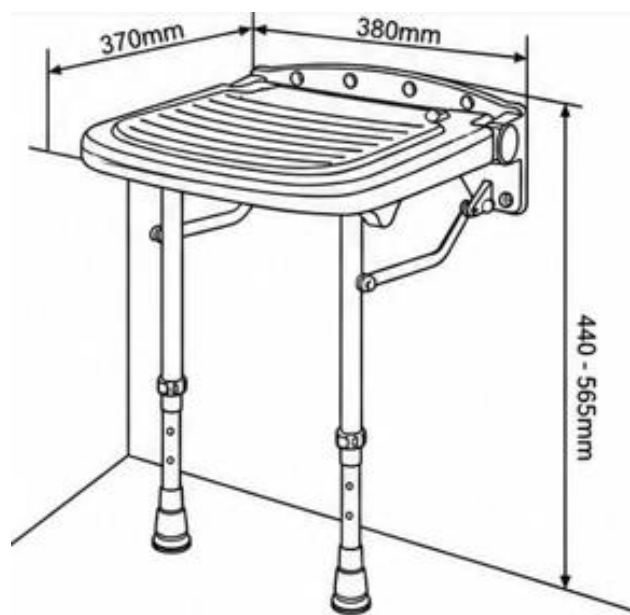

158 kg

charge maximale

46,7 à 59,2 cm

hauteur réglable

7 points*

fixation murale

38 x 36,5 cm

dimensions assise

!


Important

Installer le siège sur une paroi suffisamment résistante avec des fixations adaptées au support. Utiliser tous les points de fixation prévus. *Le schéma H-2 joint illustre 6 vis/chevilles, la fiche produit Sourcia indique 7 points de fixation.



1. Éléments fournis et dimensions

Repérage des composants avant installation

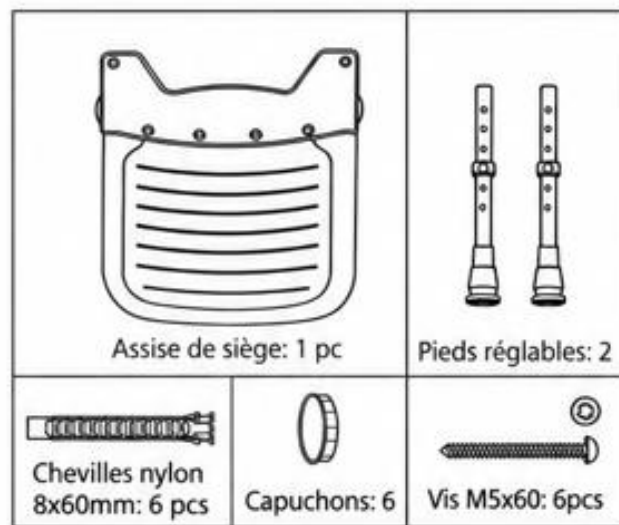

Élément	Quantité
Assise / support mural	1 ensemble
Pieds réglables	2
Chevilles nylon 8 x 60 mm	6
Vis M5 x 60 mm	6
Capuchons de finition	6

i

Avant de commencer

Contrôler que toutes les pièces sont présentes et non endommagées. Selon la photo fournie, l'assise mesure environ 370 x 380 mm et la hauteur réglable illustrée est de 440 à 565 mm.



2. Préparation et sécurité

Contrôle du mur, de la zone de douche et de l'outillage



Support mural

La fixation doit reprendre les efforts du siège et de l'utilisateur. En cas de doute sur la nature du mur ou le choix des fixations, faire réaliser la pose par un professionnel.

Règles de fixation

- Utiliser tous les trous de fixation prévus par le support mural.
- Avant de percer, vérifier l'absence de câbles, canalisations ou conduites derrière le mur.
- Les fixations doivent être adaptées au matériau porteur ; la visserie murale est à vérifier selon le support.
- Positionner le siège de niveau et prévoir une hauteur permettant aux deux pieds de reposer fermement au sol.
- Porter une protection adaptée lors du perçage du carrelage ou de la maçonnerie.

Outillage conseillé

- Niveau à bulle
- Crayon ou pointe de marquage
- Perceuse et foret adaptés au revêtement et au support
- Tournevis / embout adapté aux vis
- Mètre ruban




Risque de pincement

Lors du rabattement ou du relevage du siège, garder les doigts éloignés des articulations et des zones de pivot.




3. Fixation murale

Repérage, perçage et pose du support

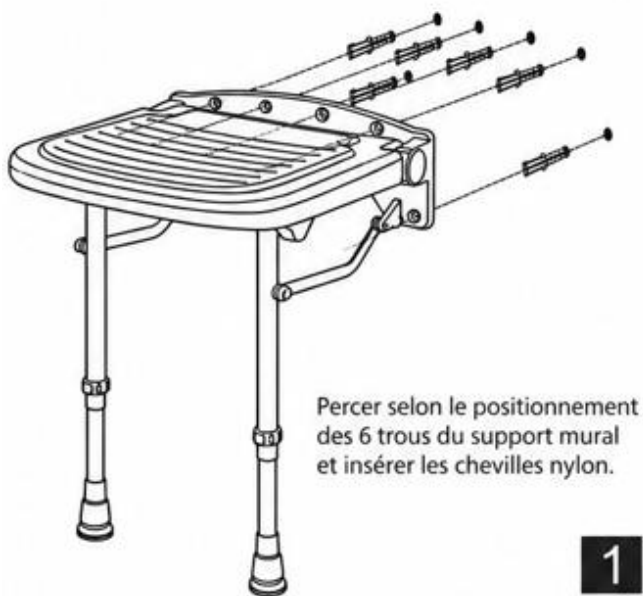

Étape 1 - positionner, repérer puis percer

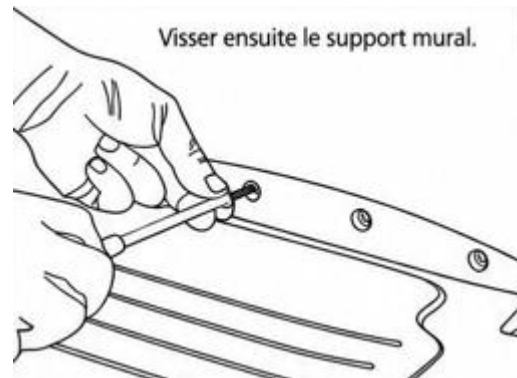

Étape 2 - visser le support mural

1

Positionner le siège

Présenter l'ensemble à l'emplacement souhaité. Régler provisoirement les pieds pour que leurs embouts reposent au sol et mettre l'assise parfaitement de niveau.

2

Repérer les points de fixation

Utiliser le support mural comme gabarit et marquer précisément les trous de fixation visibles sur le support.

3

Percer et cheviller

Percer avec un foret adapté puis insérer les chevilles. Le schéma joint représente des chevilles nylon 8 x 60 mm.

4


Visser le support

Mettre en place les vis de fixation puis serrer progressivement en alternant les points, sans déformer le support.




4. Finition et réglage

Capuchons, pieds réglables et contrôle du rabattement

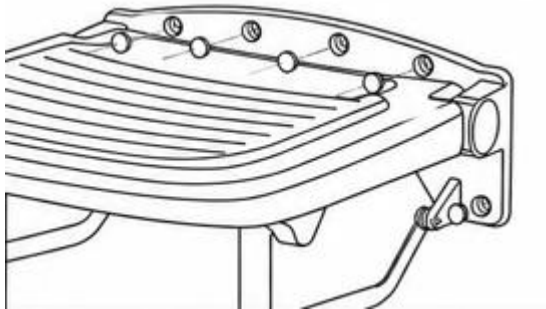

Étape 3 - insérer les capuchons de finition

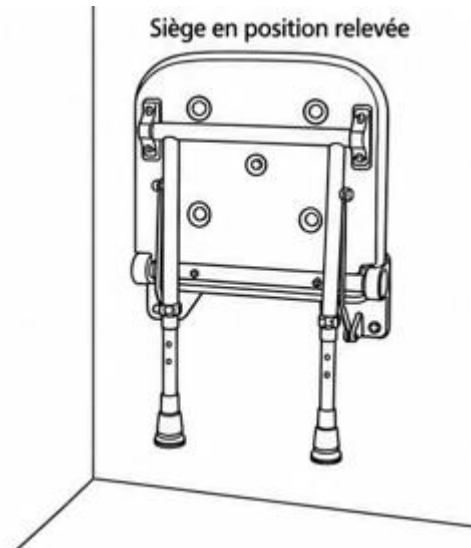

Étape 4 - siège en position relevée

1

Poser les capuchons

Insérer les capuchons de finition sur les points de fixation une fois le serrage vérifié.

2

Régler les pieds

Ajuster les deux pieds à la même hauteur pour obtenir une assise stable. Les deux embouts doivent porter franchement sur le sol.

3

Contrôler le mécanisme

Abaisser puis relever plusieurs fois le siège. Le mouvement doit rester libre, sans point dur, frottement anormal ni jeu excessif.

4

Vérifier la position relevée

En position rabattue, vérifier que le siège reste correctement relevé et qu'aucun élément ne se desserre.

✓

Contrôle avant utilisation

Vérifier la stabilité de l'ensemble, le serrage des fixations, l'appui complet des deux pieds et le bon fonctionnement du mécanisme.



5. Utilisation et entretien

Consignes d'usage et contrôles périodiques

Utilisation

- Utiliser le siège uniquement comme assise de douche.
- Ne jamais se tenir debout sur le siège.
- Ne pas dépasser la charge maximale indiquée par la fiche produit et vérifier la bonne installation avant usage.
- Ne pas utiliser le siège s'il présente du jeu, une fixation desserrée ou un pied endommagé.
- Rabattre le siège avec précaution et éviter toute zone de pincement.

Entretien

- Nettoyer avec un produit ménager doux et une éponge non abrasive, puis rincer et essuyer.
- Contrôler régulièrement les fixations murales, les articulations et les embouts de pieds.
- Resserrer immédiatement toute fixation présentant du jeu et remplacer toute pièce endommagée avant réutilisation.

Programme de contrôle conseillé

Point à vérifier	Action
Fixations murales	Vérifier le serrage de tous les points
Pieds réglables	Vérifier l'appui complet au sol
Embouts de pieds	Remplacer s'ils sont usés
Articulations / pivot	Nettoyer et contrôler le jeu
Stabilité générale	Arrêter l'usage si instable
!	En cas d'anomalie Cesser immédiatement d'utiliser le siège si une fixation, un pied ou une articulation présente un défaut pouvant affecter la stabilité ou la sécurité.